


Approved by FDA & CE



QBit 9

Ultrasonido inteligente

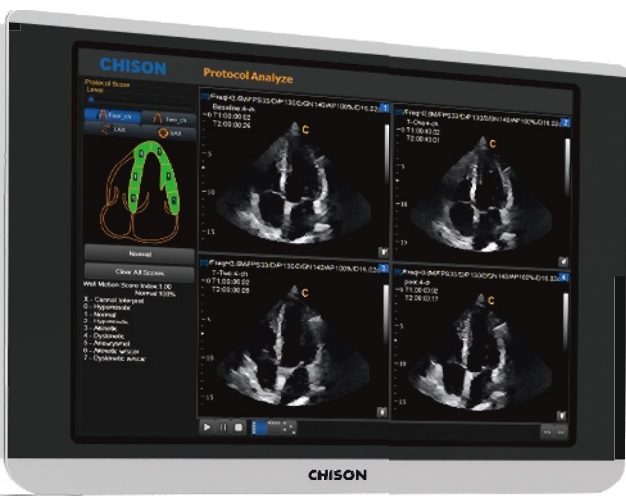

CHISON
Value Beyond Imaging

Ergonomico

19" LED arriba y abajo
90° plegable



Vista de Profundidad



La pantalla LED puede girar izquierda y derecha $-90^{\circ} \sim 90^{\circ}$ permite una visión diferente ángulos de pacientes y operadores

Sistema de audio estéreo



Teclas retroiluminadas

Teclado flotante con izquierda/derecha rotación $-45^{\circ} \sim 45^{\circ}$, arriba/abajo ajuste de altura 0cm $\sim$ 15cm




Puertos USB



Kit "héroe"

Solución de servicio innovador
Rápida • Fácil • Fiable • Asequible

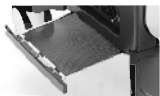

Filtro de polvo extraíble.

Funcionando – baterías de

80min (opción)



Impresión de papel hacia el frente, para facilitar el acceso.

35.6 cm
pequeño soporte de impresión

Cuatro ruedas con bloqueo



HD virtual

- La última innovación en 4D en tiempo real con un potente motor de imagen.
- Puede fortalecer el vínculo entre la madre y el feto. Con fuente de luz virtual móvil.


Cuidado de la salud de las mujeres




BPD, Modo B



Cordón umbilical, Modo C

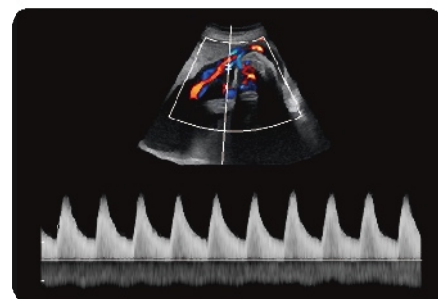

Cordón umbilical, Modo de PW

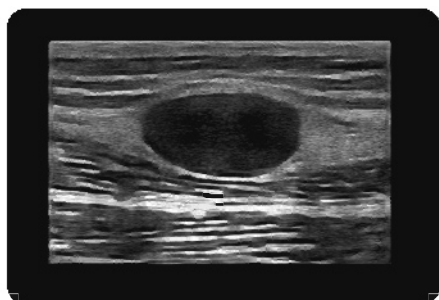


Quiste mamario, Modo B




Útero, Modo B




Embarazo temprano, Modo B

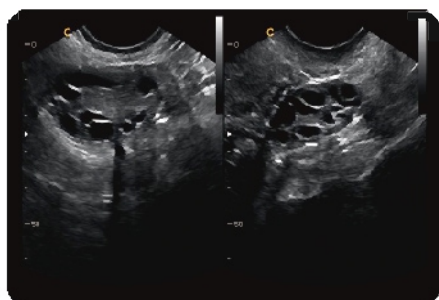

Ovario, modo 2B

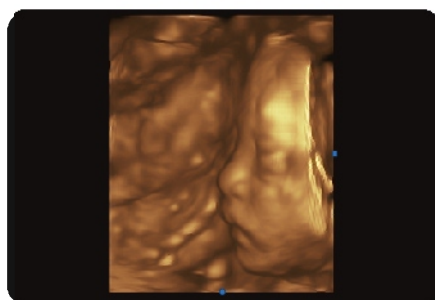


Cara fetal, Modo de 4D

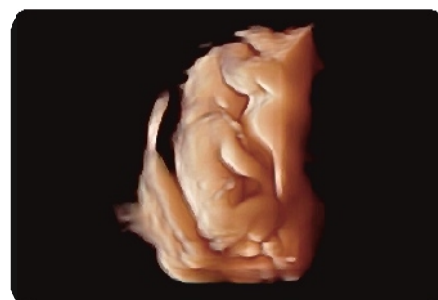


Cuerpo fetal, HD Virtual

FHI


- Modifica la transmisión y recepción del flujo para maximizar la resolución sin perder la penetración en pacientes de mayor tamaño corporal.
- Mejor que el THI tradicional y el armónico en fase que comprometen la penetración .
- Esto ayuda mucho a mejorar la confianza diagnóstica en pacientes grandes.

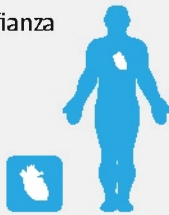


Rendimiento de Cardiología QBit 9

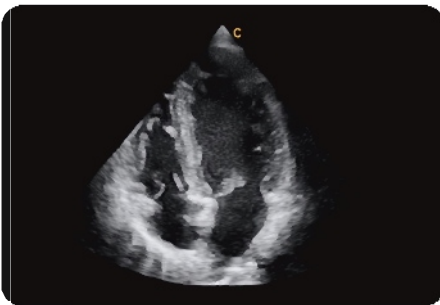


Apicales cuatro cámaras, de Modo de FHI

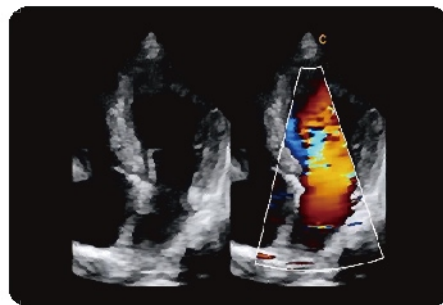


Apicales cuatro cámaras, de Modo de C

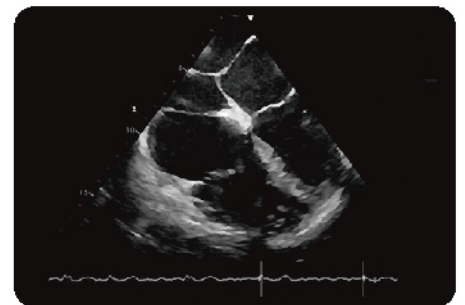


Cardiaco, TEE

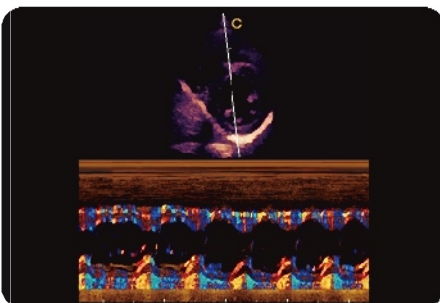

Eje corto de músculo papilar, TDI M Modo

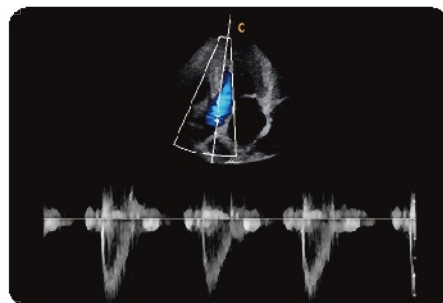

Válvula aórtica, Modo de PW

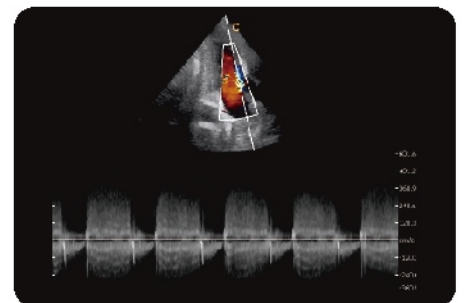

AV regurgitación, Mode CW



Funcionamiento magistral

art performance is a noun phrase



PISA

PISA es Proximal Isovelocity Surface Area, un método para mirar la convergencia del flujo, para calcular la severidad del MR/TR/PR.

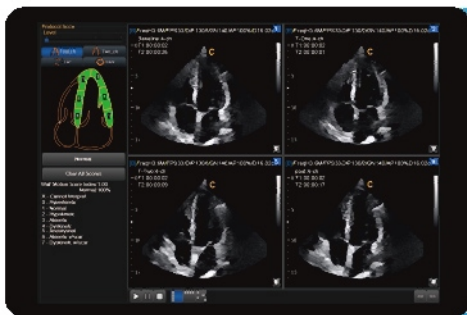
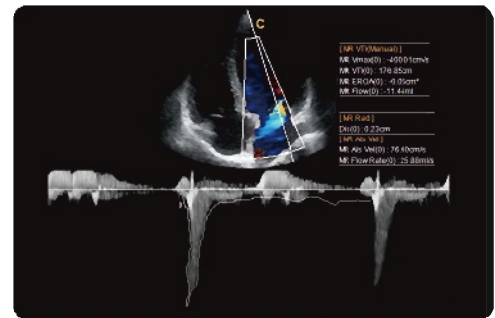


StressEcho

Un ecocardiograma es un examen indoloro, inofensivo que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para examinar la función de anatomía del corazón.

Tejido Doppler Imaging (TDI)

Doppler tisular es una técnica de ecocardiografía noveda que mide directamente la velocidad miocardio. Sistólicas medidas TD evaluación la función contráctil del miocardio ventricular izquierda y derecha. Valores de TD diastólicos reflejan relajación del miocardio.

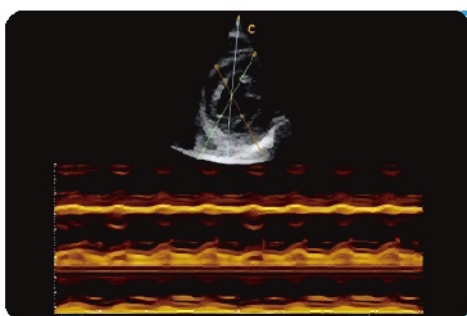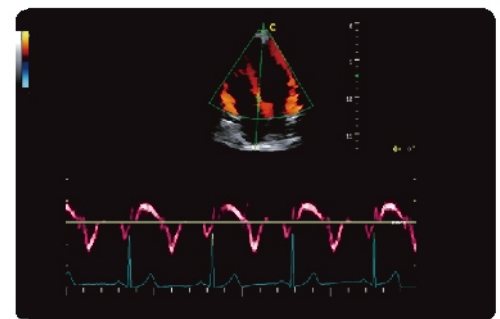


Modo M Free Steering

La línea de cursor se puede girar en 360 grados y colocada en la posición deseada, hasta 3 líneas se pueden utilizar para mediciones simultáneas.

Tecnologías avanzadas


Q-imagen

- Algoritmos innovadores que fortalecen significativamente las imágenes obteniendo mejores resultados.
- Chipse avanzado, se utiliza para obtener los fotogramas rápidos.

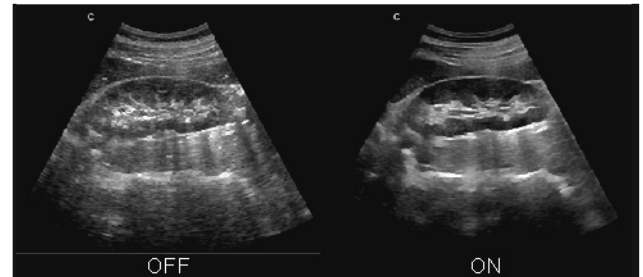


Proyector Q-beam

- En comparación con la tradicional doble haz, QBit utiliza quad-beam Para recibir la señal, por lo tanto duplica el volumen de la señal recibida, así como la velocidad de fotogramas.
- Mayor velocidad de fotogramas asegura una mejor confianza y eficiencia en el diagnóstico.

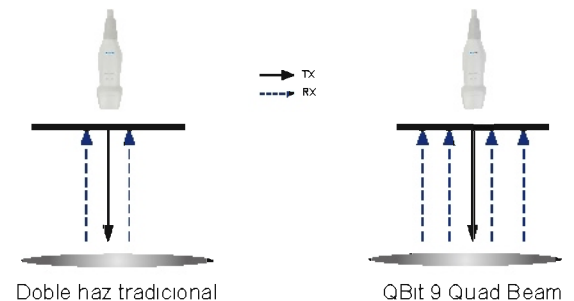


Q-flow

- Esta tecnología de detección de color adaptativo puede ajustar automáticamente la evaluación de la señal de color y ruido según los diferentes tejidos.
- Como resultado, la sensibilidad al color del flujo de baja velocidad es significativamente mayor.

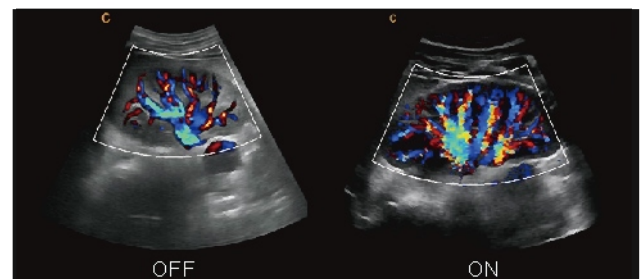


X-contrast

- El QBit permite ajustar la resolución de contraste con un toque del usuario basandose en las diferencias de las densidades del tejido.
- Activado por una tecla: Enhance, Normal, Suppress.

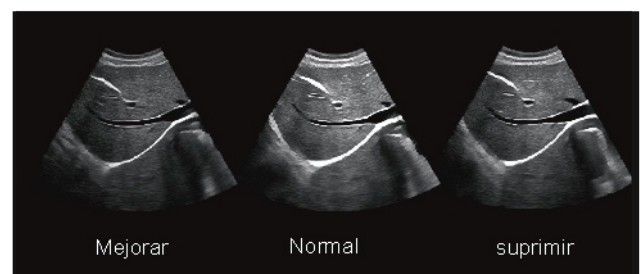





General imágenes pequeñas piezas

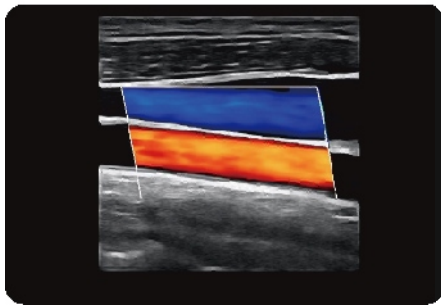


Carótida, Modo de C

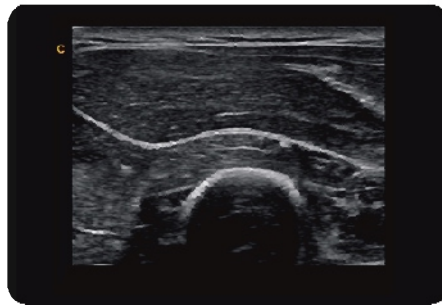


Codo, Modo B

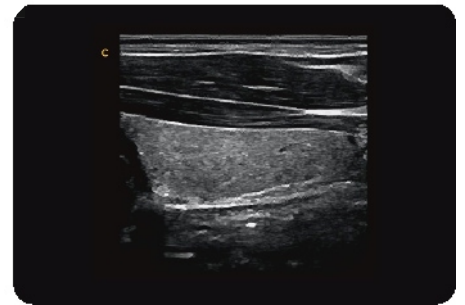


Tiroides, Modo B

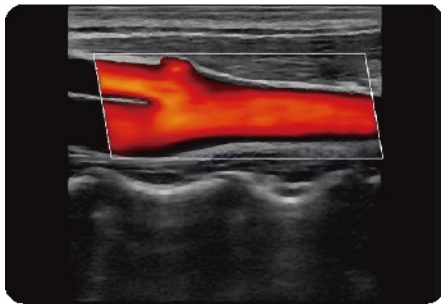


Carótida, Modo de C

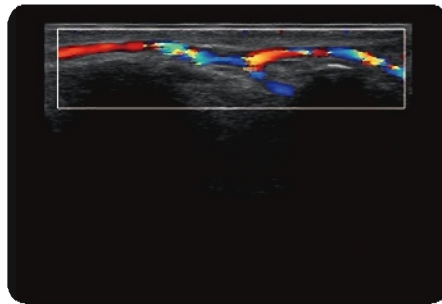


Dedo, Modo de C

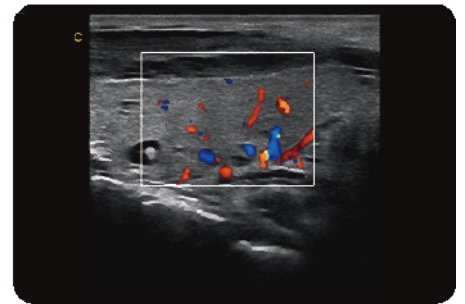

Tiroides, Modo de C

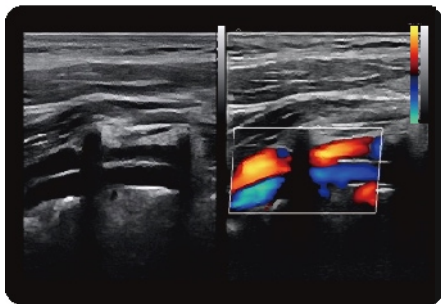


Arteria vertebral, Modo de 2B

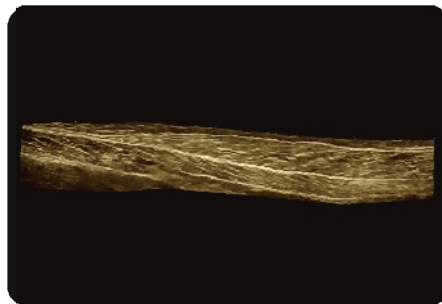


MSK, curva la proyección de imagen panorámica



Riñón, Modo C

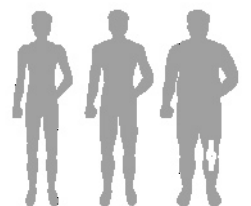

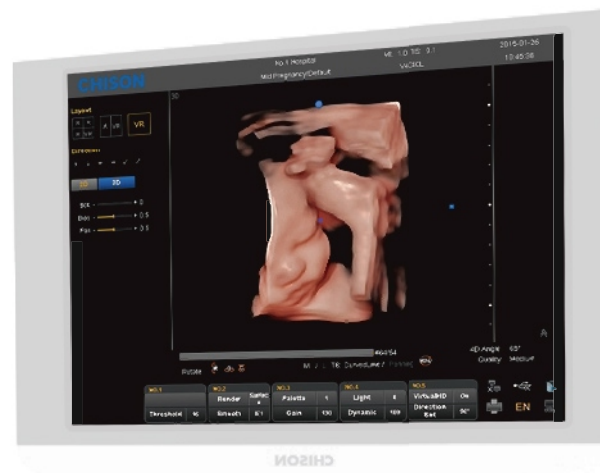

QBit 9

Ultrasonido inteligente



2.0MHz-6.8MHz Convexo
D3C60L



4.0MHz-15.0MHz Lineal
D7L40L



7.0MHz-18.0MHz (Con FHI) Lineal
D12L40L



4.0MHz-15.0MHz Lineal
D7L60L-60mm



4.0MHz-12.0MHz Transvaginal
D6C12L



1.5MHz-5.3MHz Phased array
D3P64L



4.0MHz-15.0MHz Transvaginal
D7C10L



4.0MHz-15.0MHz Trans Rectal
D7L40L-REC



2.0MHz-6.8MHz Volumen de
V4C40L



2.0MHz-6.8MHz Micro-Convexo
D3C20L




2.0MHz-8.0MHz Phased array
D6P64L



4.0MHz-12.0MHz Micro-Convexo
D6C15L



4.0MHz-10.7MHz Micro-Convexo
D5C20L

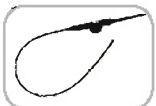

4.0MHz-6.0MHz Tee (Adult)
T5P64L



4.0MHz-6.0MHz Tee (Pediatric)
MT5P48L



1.5MHz-2.5MHz Penial
D2D16L



4.0MHz-10.7MHz Lineal
D7L30L

CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD.

Sales & Service Contact Address:

No. 9 Xin Hui Huan Road, New District, Wuxi, Jiang Su Province, China 214028

TEL: 0086-510-86310593 / 86310937 FAX: 0086-510-86310728 EMAIL: export@chison.com.cn

We reserve the right to make changes to this catalogue without prior notice.
Please contact our local dealer for the latest information.